

ご使用のインスリンをヒューマログミリオペンに
変更される患者さんへ

インスリン注入器の変更について

監修 順天堂大学医学部附属練馬病院糖尿病・内分泌内科 前任准教授 川角正彦先生

今、お使いのインスリン注入器が変更になることがあります。

インスリンは製剤によって、下のような違いがあります。

医師が、患者さんの血糖コントロールのために、より適したインスリン製剤に変更することを勧めることがあります。またインスリン製剤変更の際には、注入器も変更となる場合があります。注入器の使い方や薬価については、患者さんのご希望にも配慮します。

- 効果(作用の現れる速さ、持続時間など)
- 注入器の使い方(準備、操作、保管など)
- 注射してから押したまま保持する時間
- 薬価(薬剤費)

インスリン注入器が変更になったときには…


インスリンが別の注入器に切り替わったときには、新しい注入器 の取扱説明書等をよく読んで、それにしたがって準備、注射、保管をしましょう。

復習! 注射する場所

- 注射する部位を決めましょう。
- 注射する場所は、その部位の中で毎回かえましょう。


注射する場所を
2~3センチずらす

注射する部位

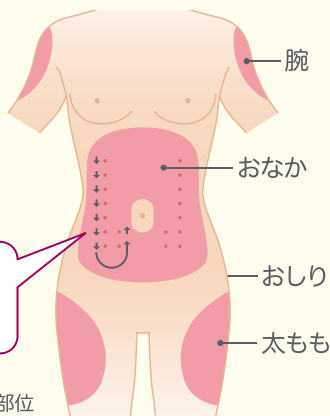

後かたづけ

針ケースをまっすぐにかぶせ、回して注射針を取り外します。

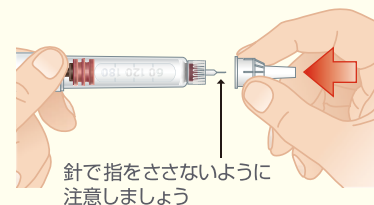


(イラストはミリオペン®の例)

ヒューマログ[®] ミリオペン[®]を 使いはじめる際の使い方のポイント

1 14.5cmとコンパクトサイズです




2 単位の設定は単位設定ダイヤルを回すだけです

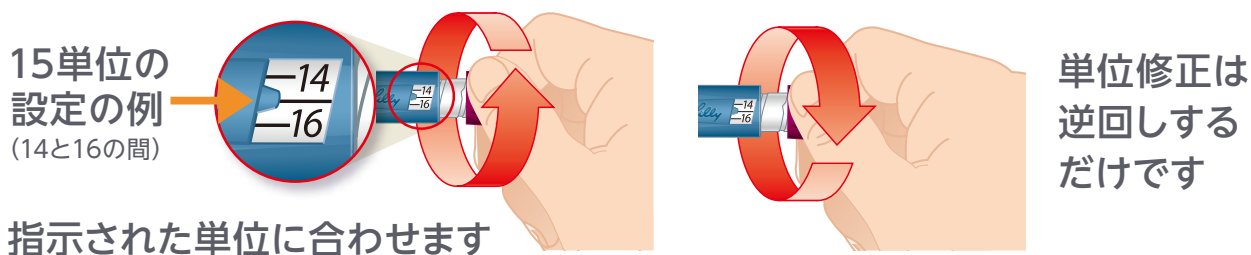

3 押したまま5秒以上待つて抜きましょう

単位設定ダイヤルが
止まるまでしっかり押した後、
押したまま5秒以上待ちます

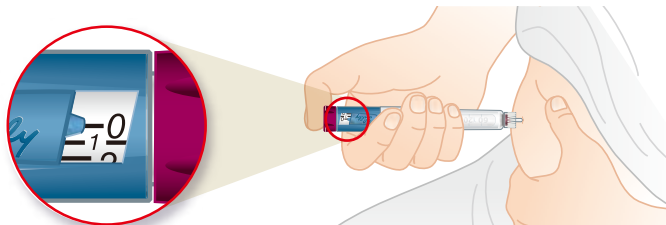

単位表示窓に「0」と表示されていることを確認しましょう
設定量が注射できたことを確認できます

※ミリオペンの詳しい使い方については取扱説明書等をご参照ください。