

ミリオペン®製剤へ変更される糖尿病患者さんへ

# インスリン グラルギン<sup>®</sup> BS注ミリオペン<sup>®</sup>「リリー」

## 使い方解説

他のインスリン製剤からインスリン グラルギンBS注ミリオペン<sup>®</sup>「リリー」に変更する際に知っておいていただきたいことをご紹介します。

### 【ご注意ください】

ミリオペン<sup>®</sup>に変更になったときには、  
取扱説明書等をよく読んで準備、注射、保管をしましょう。




14.5cmとコンパクトなサイズです

白いボディとうぐいす色のラベル・注入ボタンが目印です

赤いインジケーターが設定単位を表します

ご使用前に、ラベルに記載されている製品名や使用期限※を確認してください。

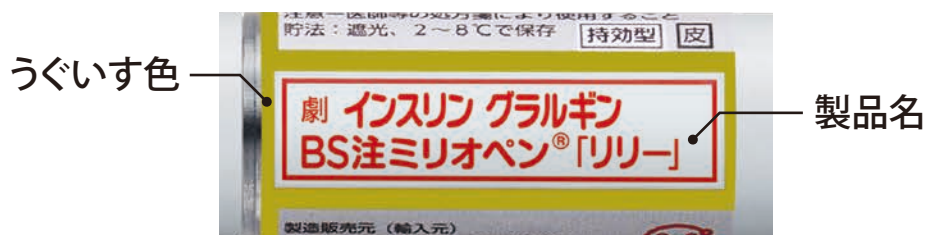

※使用期限は製品名が印字されている面の反対側に記載してあります

お問合せ先: **Lilly Answers** リリーアンサーズ

日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口（一般の方・患者様向け）

**フリーダイヤル 0120-245-970 | 078-242-3499\***

\*フリーダイヤルでの接続ができない場合、このお電話番号にお掛けください。尚、通話料はお客様負担となります。


[www.lillyanswers.jp](http://www.lillyanswers.jp)

日本ベーリンガーインゲルハ임株式会社  
東京都品川区大崎2丁目1番1号

日本イーライリリー株式会社  
神戸市中央区磯上通7丁目1番5号

# インスリン グラルギン<sup>®</sup> BS注ミリオペン<sup>®</sup>「リリー」の使い方

## 1 キャップをまっすぐに取り外す

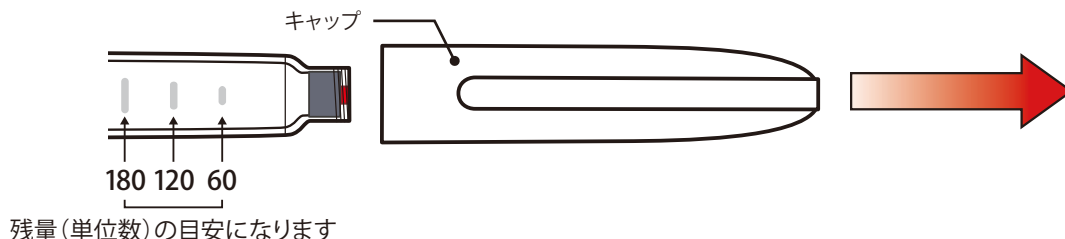

ご注意ください


### キャップはねじらず、まっすぐに外す!

- ミリオペン<sup>®</sup>は四角い形状をしているため、ねじってキャップを外そうとすると、キャップが外れなくなることがあります。
- キャップが外れないときは、キャップとペン本体を少し回して、四角い側面が合うように戻してください。

## 2 注射針の保護シールをはがし、注射針を取り付ける


## 3 空打ちを行う ※注射のたびに2単位に設定し、インスリンが流れ出るまで行ってください

## 4 指示された単位に合わせる

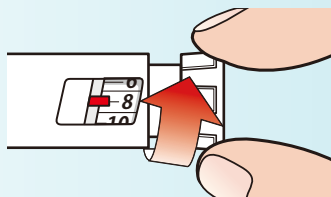

Point!

### 設定単位は赤いインジケーターで確認!

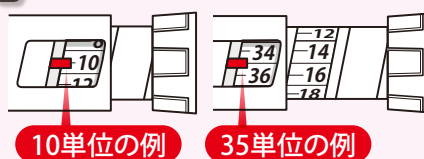

設定単位量が偶数が奇数かで、目盛りの示す位置が異なります。

## 5 注射部位をアルコール綿で消毒する ※注射する場所は、毎回2～3cmずつずらしましょう

## 6 皮膚に注射針を刺し、単位表示窓に「0」が表示されるまで注入ボタンを完全に押し込む

Point!

### 注射した状態で待つ時間は「5秒以上」!



注入ボタンを完全に押し込んだ状態で5秒以上待ち、そのまま皮膚から抜きます。

## 7 注射後は、注射針を外してから保管する

### 保管の温度

未使用：2～8℃ 使用中：30℃以下の室温

詳しい使い方は、取扱説明書をご覧ください。